


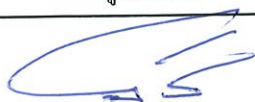



วิธีการปฏิบัติงาน : วิธีการทำความสะอาดเครื่องบรรจุยาของ GR และยาเม็ด TB		หน้าที่ 1 จาก 6
รหัสเอกสาร : W-FM-006	วันที่ประกาศใช้ : 20/02/2564	แก้ไขครั้งที่ : 02

วิธีการปฏิบัติงาน: วิธีการทำความสะอาดเครื่องบรรจุยาของ GR และยาเม็ด TB

รหัสเอกสาร : W-FM-006

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของบริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด การคัดลอกหรือทำสำเนาต้อง
ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเท่านั้น

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
 นาย วรัชชัย จันทอง ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายผลิตยาน้ำยาทราย	 คุณ นิพิฐพนธ์ วงศ์สัตยญา ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิต	 คุณ จันทงค์ เกษมพิน ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน
วันที่ : 20/02/2564	วันที่ : 20/02/2564	วันที่ : 20/02/2564



วิธีการปฏิบัติงาน : วิธีการทำความสะอาดเครื่องบรรจุของ GR และยาเม็ด TB		หน้าที่ 2 จาก 6
รหัสเอกสาร : W-FM-006	วันที่ประกาศใช้ : 20/02/2564	แก้ไขครั้งที่ : 02

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาดเครื่องผสมยา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างที่เครื่องผสมยาไปปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้งานที่ผลิตมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ขอบข่าย

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการล้างหรือทำความสะอาดเครื่องผสมยาทั้งระบบ ที่จัดเข้าอยู่ในระบบคุณภาพรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในโรงงานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

F - PD - 002 Rev.

ใบบันทึกการตรวจสอบความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์

F - PD -012 Rev 02

ใบเบิกสารเคมีเพื่อกระบวนการผลิต

F - PD -018 Rev 02

แบบบันทึกการล้าง / ทำความสะอาดอุปกรณ์ การผลิต / บรรจุ

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015

ข้อ 2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์

ข้อ 2.4 สาธารณูปโภค

ข้อ 3.1 ปัจจัยหลักในระบบควบคุมความปลอดภัย

ข้อ 3.5 ระบบเอกสารและบันทึก

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าแผนกผลิต

หัวหน้าหน่วยผลิต

พนักงานผลิต

แผนกคลังสินค้า

วิธีการปฏิบัติงาน : วิธีการทำความสะอาดเครื่องบรรจุยาของ GR และยาเม็ด TB		หน้าที่ 3 จาก 6
รหัสเอกสาร : W-FM-006	วันที่ประกาศใช้ : 20/02/2564	แก้ไขครั้งที่ : 02

วิธีการปฏิบัติ วิธีการทำความสะอาดเครื่องบรรจุยาของ GR

ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าแผนกinya หัวหน้าหน่วย พนักงาน	ทำการถ่ายสารเคมีออกจากเครื่องบรรจุ	หัวหน้าหน่วย	
หัวหน้าหน่วย พนักงาน	ทำการใช้แปรงปัดสารเคมีออก	หัวหน้าหน่วย	
หัวหน้าหน่วย พนักงาน	ทำการใช้ลมเป่าเครื่องบรรจุอีกครั้ง	หัวหน้าหน่วย	
พนักงาน	ทำการหยดน้ำมันเครื่อง	หัวหน้าหน่วย	
หัวหน้าหน่วย	ลงบันทึกการทำความสะอาด	หัวหน้าหน่วย	F -PD -018 Rev.02



วิธีการปฏิบัติงาน : วิธีการทำความสะอาดเครื่องบรรจุยาของ GR และยาเม็ด TB		หน้าที่ 4 จาก 6
รหัสเอกสาร : W-FM-006	วันที่ประกาศใช้ : 20/02/2564	แก้ไขครั้งที่ : 02

วิธีการปฏิบัติ วิธีการทำความสะอาดเครื่องบรรจุยาเม็ด TB

ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าแผนกป้อนยา หัวหน้าหน่วย พนักงาน	ทำการถ่ายสารเคมีออกจากเครื่องบรรจุ	หัวหน้าหน่วย	
หัวหน้าหน่วย พนักงาน	ทำการใช้แปรงปัดสารเคมีออก	หัวหน้าหน่วย	
หัวหน้าหน่วย พนักงาน	ทำการใช้ลมเป่าเครื่องบรรจุอีกครั้ง	หัวหน้าหน่วย	
หัวหน้าหน่วย	ลงบันทึกการทำความสะอาด	หัวหน้าหน่วย	F -PD -018 Rev.02

วิธีการปฏิบัติงาน : วิธีการทำความสะอาดเครื่องบรรจุยาของ GR และยาเม็ด TB		หน้าที่ 5 จาก 6
รหัสเอกสาร : W-FM-006	วันที่ประกาศใช้ : 20/02/2564	แก้ไขครั้งที่ : 02

รายละเอียดวิธีการทำความสะอาดเครื่องบรรจุยาของ GR

- 1.ทำการถ่ายสารเคมีออกจากเครื่องบรรจุ
- 2.ทำการใช้แปรงปัดสารเคมีออก
- 3.ทำการใช้ลมเป่าเครื่องบรรจุอีกครั้ง
- 4.ทำการหยคน้ำมันเครื่อง
- 5.ลงบันทึกการทำความสะอาด

รายละเอียดวิธีการทำความสะอาดเครื่องบรรจุยาเม็ด TB

- 1.ทำการถ่ายสารเคมีออกจากเครื่องบรรจุ
- 2.ทำการใช้แปรงปัดสารเคมีออก
- 3.ทำการใช้ลมเป่าเครื่องบรรจุอีกครั้ง
- 4.ลงบันทึกการทำความสะอาด



แก้ไขครั้งที่ : 02

บันทึกการแก้ไขปรับปรุง

คุณ จำนงค์